



POSIZIONAMENTI

Sistemi di posizionamento

Tarta

Schienale Tarta Original ed Emys



Tarta esprime il perfetto connubio tra lo stile italiano e la funzionalità di uno schienale ergonomico e confortevole.

Un'idea rivoluzionaria, realizzata con materiali innovativi. Tarta è dotato di possibilità di personalizzazione estrema.

Alla preesistente versione **ORIGINAL**, si affianca il modello **EMYS**. Tarta ha generato le due versioni ponendo alla base un'idea forte: superare i limiti di un comune schienale rigido fornendo la massima libertà di movimento attraverso un'estetica moderna.



Tarta ha ricevuto diversi riconoscimenti per funzionalità e design.



reddot design award





POSIZIONAMENTI
Sistemi di posizionamento

Tarta

Schienale Tarta ORIGINAL



Schienale Tarta EMYS

Tutti i materiali che compongono gli schienali TARTA sono studiati per il massimo della performance e per consentire duttilità e massima personalizzazione.

Le doghe della versione ORIGINAL sono in alluminio anodizzato. Le vertebre sono in ABS caricato a vetro. L'acciaio armonico dei componenti di collegamento utilizzati all'interno delle vertebre, se sottoposto a deformazione, mantiene una memoria sulla posizione originale.

Le linee semplici e morbide della versione EMYS fondono ergonomia e bellezza. La struttura è composta da una colonna centrale sulla quale si sovrappongono due piastre scorrevoli metalliche con doghe laterali in alluminio sulla quale aderiscono i pad imbottiti.



La struttura è una "colonna centrale", la normale colonna vertebrale, sulla quale si innestano le doghe laterali in alluminio.

La forma delle imbottiture segue perfettamente quella delle doghe in alluminio, questo assicura la massima superficie di appoggio garantendo, grazie all'alta densità ed alla particolare composizione, elevato confort e grande traspirabilità favorita anche dagli spazi tra i vari moduli. La prima dogha ha il profilo superiore arrotondato.

Al numero desiderato di vertebre, si possono applicare doghe e "pad" (cuscinetti) di diverse forme tali da realizzare la versione custom.

Il peso dello schienale varia da 960 a 1880 g, i cuscinetti sono imbottiti in schiuma della densità di 49 kg/m³ e rivestiti con tessuto traspirante.

I cuscinetti imbottiti (in schiuma 40 kg/m³, con finitura in tessuto traspirante anallergico), consentono di dare un supporto localizzato, adattandosi in modo perfetto, permettendo al sistema un confort ottimale.

Gli schienali TARTA coniugano contenimenti laterali e supporti leggeri, lasciando libertà di movimento (dove assume particolare rilievo la capacità di torsione, anche questa regolabile) ed un adeguato sostegno alla parete dorsale.

ORIGINAL ed EMYS sono entrambi dotati di grande "flessibilità dinamica" perché permettono di personalizzare il grado di fissazione o di ritorno elastico della parte centrale.

La flessibilità della colonna permette inoltre di assecondare sia una postura attiva in fase di auto-spinta, che una postura "di riposo". Infatti quando un appoggio completo del tronco del paziente consente alla colonna dello schienale di flettere, si apre l'angolo di seduta, dando così un supporto completo e confortevole ed evitando la classica "retroversione del bacino".

Le doghe e più in generale la forma dello schienale è facilmente regolabile in entrambe le versioni, TARTA nasce per seguire perfettamente le esigenze dell'utente.





POSIZIONAMENTI
Sistemi di posizionamento

Tarta

Schienale Tarta ORIGINAL



L'idea iniziale di uno schienale in grado di adattarsi perfettamente alle necessità ergonomico-posturali dell'utente è stata standardizzata attraverso la definizione di determinate configurazioni.

Si distingue tra una versione STANDARD e CONTOUR, quest'ultima caratterizzata da doghe curve o maggiormente avvolgenti. Entrambe le versioni sono disponibili in diverse misure a seconda della lunghezza ed avvolgenza delle doghe fornite con ciascuna configurazione di base: Small, Medium, Large, Extralarge.

Analizzando l'altezza dello schienale è possibile classificare queste versioni in schienali da 4, 5 oppure 6 vertebre. Per la versione Tarta ORIGINAL sono disponibili 24 configurazioni.

TARTA ORIGINAL STANDARD

TARTA ORIGINAL CONTOUR

4 VERTEBRE

5 VERTEBRE

6 VERTEBRE

Disponibile nella misure: S, M, L, XL

Disponibile nella misure: S, M, L, XL

Disponibile nella misure: S, M, L, XL



Disponibile nella misure: S, M, L, XL

Disponibile nella misure: S, M, L, XL

Disponibile nella misure: S, M, L, XL



ATTACCHI Schienale Tarta ORIGINAL

Lo schienale TARTA ORIGINAL può essere montato su una carrozzina con telaio rigido o pieghevole attraverso le differenti tipologie di attacco esistenti. In totale gli attacchi sono cinque.

Carrozzina con telaio rigido

Attacco standard



L'attacco consente di agganciare lo schienale su tubi da 19 a 22 mm.

Attacco corto



Progettato per favorire il recupero di profondità sulla seduta della carrozzina. L'attacco consente di agganciare lo schienale su tubi da 19 a 22 mm.

Attacco regolabile



L'attacco consente di agganciare lo schienale su tubi da 19 a 22 mm. È regolabile in altezza, profondità ed inclinazione.

Carrozzina con telaio pieghevole

Attacco standard



Composto da una fascia montata sui due tubi della carrozzina tramite appositi morsetti. Sulla fascia è applicato lo schienale attraverso una coppia di ganci. La fascia è disponibile in due misure: per schienali misura S-M ed L-XL.

Attacco con barra di irrigidimento



La barra di irrigidimento è removibile dai tubi dello schienale. Sono disponibili 2 barre: una per carrozzine da 35 a 42 cm e una per carrozzine da 39 a 46 cm. Barre montabili su tubi di diametro tra i 19 e 25 mm.



POSIZIONAMENTI

Sistemi di posizionamento


Tarta

Schienale Tarta EMYS



Rispetto al grado di avvolgenza dello schienale sono disponibili tre versioni: **STANDARD**, **CONTOUR** e **DEEP CONTOUR**. Valutando l'altezza dello schienale ciascuna versione è disponibile nel modello da: 3, 4 e 5 vertebre. Mentre riguardo alla dimensione e forma delle doghe si distinguono modelli di misura **Medium**, **Large**, **Extralarge**.

Per la versione Tarta EMYS sono disponibili 21 configurazioni.

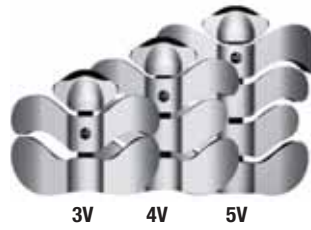

M per carrozzine da 35 a 40 cm



L per carrozzine da 38 a 43 cm



XL per carrozzine da 40 a 45 cm

TARTA EMYS STANDARD

TARTA EMYS CONTOUR

TARTA EMYS DEEP CONTOUR



3 VERTEBRE

Disponibile
nella misure:
M, L, XL



Disponibile
nella misure:
M, L, XL



4 VERTEBRE

Disponibile
nella misure:
M, L, XL



Disponibile
nella misure:
M, L, XL



Disponibile
nella misure:
M, L, XL



5 VERTEBRE



Disponibile
nella misure:
M, L, XL



Disponibile
nella misura:
M, L, XL



ATTACCHI Schienale Tarta EMYS

Lo schienale TARTA EMYS può essere montato su una carrozzina con telaio rigido o pieghevole attraverso due differenti tipologie di attacco.

Carrozzina con telaio rigido

Attacco regolabile



L'attacco è regolabile in altezza, inclinazione e profondità, questo consente una elevata adattabilità rispetto al modello della carrozzina e soprattutto alle esigenze posturali dell'utente. Consente di agganciare lo schienale su tubi della carrozzina da 19 a 22 mm.

Carrozzina con telaio pieghevole

Attacco con barra di irrigidimento



La barra di irrigidimento è removibile dai tubi dello schienale. Sono disponibili 2 barre regolabili di differente lunghezza: una per carrozzine con seduta di larghezza compresa da 35 a 42 cm e una per carrozzine da 39 a 46 cm. Barre montabili su tubi di diametro tra i 19 e 25 mm.



POSIZIONAMENTI
Sistemi di posizionamento

Tarta

Schienale Tarta: personalizzazione estetiche



Gli schienali Tarta permettono anche una grande personalizzazione estetica. È possibile scegliere doghe di diversi colori. La personalizzazione è possibile in tinta unita utilizzando i seguenti colori:



Nel modello ORIGINAL le doghe possono essere personalizzate con effetto “soft touch”.

L'aerografia permette di produrre pezzi unici, di grande impatto visivo.

Tarta ORIGINAL



Tarta EMYS



ACCESSORI Schienale Tarta

Tarta Bag

Tarta Pocket



Codice articolo	Descrizione
TBAG	Tarta Bag: borsa portaoggetti per carrozzina rigida

Codice articolo	Descrizione
TPOCK	Tarta Pocket: tasca posteriore per carrozzina

Fissata con un velcro, tra il telo di seduta e il cuscino. I vani separati permettono di trasportare indumenti nella tasca principale, oggetti di valore per la cura e igiene personale in comparti separati. Dotata di sezioni catarifrangenti.

Tarta Pocket viene fissata nella parte posteriore della carrozzina, sullo schienale Tarta. È dotata di gancetti per il fissaggio alle doghe dello schienale e di sezioni catarifrangenti.