



POSIZIONAMENTI

Posizionamento a letto e protezioni

Pigiama, cintura in velcro

Pigiama anti-caduta e uscita da letto BODYFIX

Il pigiama anticaduta BODYFIX è un ausilio di contenimento per **pazienti con mobilità limitata e disturbi cognitivi lievi**. Previene la caduta dell'utente e la manipolazione da parte dello stesso, degli ausili medici come tubi o cateteri. Il sistema è applicabile al materasso tramite quattro angoli elastici, adattabile ad un letto singolo.

Grazie al suo speciale design, BODYFIX trattiene l'utente ma permette allo stesso tempo di effettuare con facilità **cambiamenti di postura e di sedersi in comodità**. Vi sono inoltre due aperture laterali in velcro per permettere il passaggio di tubi e altri ausili.

La zip di chiusura è rinforzata. BODYFIX non è un sistema di immobilizzazione, quindi non è adatto all'utilizzo per pazienti particolarmente agitati o aggressivi.




Codice articolo	Descrizione
ALLM BODYFIX	Pigiama anti-caduta BODYFIX



Pigiama di contenimento BODYSYSTEM

Il pigiama di contenimento e anti-manipolazione BODYSYSTEM è stato pensato per evitare al paziente incontinentemente che si trovi in uno stato disorientato o con disturbi cognitivi, di raggiungere e/o manipolare il pannolino. Il cambio del pannolino da parte dell'assistente è agevolato perché le operazioni igieniche sono effettuate senza dover sfilare completamente il pigiama. Indicato anche per proteggere la cute del paziente, prevenendo eventuali graffi autoinflitti. Il pigiama è configurato in un unico pezzo dotato di cerniera sulla schiena per impedirne l'accesso al paziente.


Disponibile in 4 taglie con maniche e gambe lunghe.

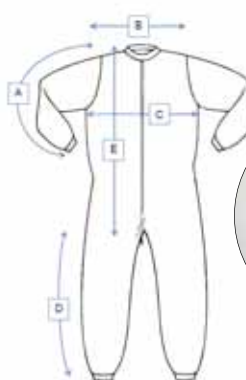

Codice articolo	A maniche	B spalle	C largh. busto	D gambe	E lungh. busto
ALLM PIG S	57 cm	39 cm	52 cm	70 cm	84 cm
ALLM PIG M	59 cm	41 cm	53 cm	70 cm	87 cm
ALLM PIG L	61 cm	43 cm	55 cm	70 cm	90 cm
ALLM PIG XL	64 cm	45 cm	58 cm	70 cm	93 cm



Traversa MEDICOVER 5 strati con ali

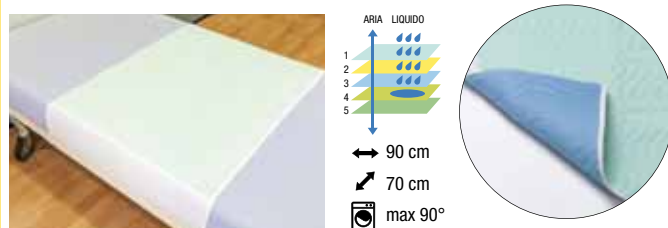

Codice articolo	Descrizione
ALLM MEDICOVER	Traversa MEDICOVER 5 strati con ali 70x90 cm

La traversa ultra assorbente MEDICOVER è un dispositivo altamente permeabile per utenti affetti da incontinenza, ideato per proteggere al meglio materassi e indumenti. Si tratta di un telo costituito da 5 strati di tessuto ad alto assorbimento, caratteristica che lo rende particolarmente confortevole perché in grado di trattenere i liquidi, mantenendo asciutto lo strato direttamente a contatto con l'utente. Le due pratiche ali, vanno posizionate sotto il materasso in maniera da limitare gli spostamenti della traversa. MEDICOVER è traspirante e riutilizzabile, lavabile in lavatrice fino a 90°.



Cintura da letto

- ↗ cintura 118 cm
- ⊘ minimo utilizzo 80 cm
- ⊘ massimo utilizzo 105 cm
- 🔥 max 40°



Cintura che garantisce la sicurezza di utenti prevenendo cadute da letto, evitando movimenti all'interno e favorendo il mantenimento di una particolare posizione. Composta da una sezione con chiusura in velcro più fibbia e gancio in acciaio per il fissaggio dell'utente ed ulteriore sezione per l'ancoraggio al letto con fibbia e ganci in acciaio.

Codice articolo	Descrizione
ALLM PGCINTLET	Cintura da letto



POSIZIONAMENTI

Posizionamento a letto e protezioni

Cinture a magneti, fascia braccio in velcro

Sistema di posizionamento di sicurezza SALVAFIX




La gamma SALVAFIX è una linea di fasce professionali di posizionamento a letto, che garantiscono il contenimento di utenti con deficit cognitivi o motori, in maniera sicura e versatile.

Tutti i prodotti sono realizzati con materiali ad alta resistenza, con un design funzionale e confortevole: forniscono un alto livello di sicurezza sia al paziente che al suo assistente. Le cinture sono dotate di lucchetti di serraggio magnetico con resistenza fino a 150 kg da inserire all'interno degli appositi occhielli, e di una chiave ad alta potenza magnetica per sbloccare velocemente i lucchetti.

Gli occhielli, creati con cucitura antistrappo, sono rivestiti in acciaio inossidabile e sono altamente resistenti a strappi e umidità.

Le fasce laterali sono cucite, per una maggiore stabilità dell'ausilio, inoltre tutte le cinture sono rinforzate sulle aree di massimo sforzo. I bordi sono imbottiti e rinforzati. Il sistema SALVAFIX è composto da diversi tipi di fasce contenitive, utilizzabili singolarmente.

È possibile inoltre, mediante la scansione del codice QR presente sulle etichette di ciascun prodotto, accedere con facilità al manuale dello stesso.

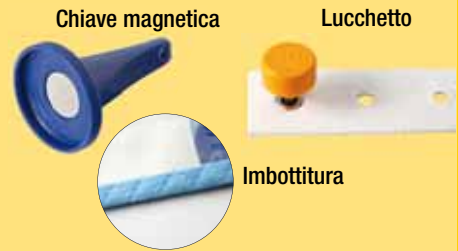

Cintura addominale con perineale SALVAFIX

Cintura per il controllo dei cambiamenti posturali del paziente. Può essere facilmente installata anche in presenza del paziente nel letto. La parte inferiore - con bande di sganciamento - deve essere fissata al telaio del letto o della barella; la parte superiore va posizionata attorno alla vita e fissata con l'apposito lucchetto magnetico (2 pezzi nella misura L). Le bande laterali con cucitura, sono destinate al controllo e alla tenuta dei movimenti laterali e trattengono il paziente dal girare a sinistra o a destra. Sono dotate di più occhielli in maniera da gestire al meglio il contenimento terapeutico. La fascia perineale previene lo scivolamento dell'utente verso il basso e il rischio di soffocamento.



Codice articolo	↗ totale	↔ cinturino
ALLM SVFADPER M	68 - 108 cm	18 cm
ALLM SVFADPER L	95 - 135 cm	18 cm

Contenuto della confezione:

- 1 cintura con 2 fasce laterali cucite e 1 perineale
- 3 lucchetti (4 per la misura L)
- 1 chiave magnetica



Cinturini ferma-polsi SALVAFIX



I cinturini di contenimento SALVAFIX consentono di immobilizzare una o entrambe le mani del paziente. Il comodo rivestimento imbottito soft-touch elimina eventuali lesioni tipicamente causate da pressione o abrasione dai tradizionali sistemi di tenuta. Oltre al fissaggio con lucchetti magnetici, il rivestimento interno in velcro, impedisce lo slittamento delle parti sovrapposte.

Codice articolo	↗ totale	↔ cinturino
ALLM SVFPOLSI	14 - 25 cm	8 cm

Contenuto della confezione:

- 2 fasce ferma-polsi con cuciture
- 4 lucchetti
- 1 chiave magnetica

Cinturini ferma-caviglie SALVAFIX

I cinturini ferma-caviglia SALVAFIX standard consentono di immobilizzare i piedi del paziente. Il comodo rivestimento morbido imbottito elimina il rischio di lesioni o abrasioni causati da tiraggio o pressioni. Il rivestimento in velcro fa aderire le parti sovrapposte, impedendone lo slittamento.

Codice articolo	↗ totale	↔ cinturino
ALLM SVFCAVI	18 - 28 cm	8 cm

Contenuto della confezione:

- 2 fasce ferma-caviglie con cuciture
- 4 lucchetti
- 1 chiave magnetica



Fasce ferma braccio con chiusura in velcro



Le fasce consentono di immobilizzare le braccia di un paziente allettato, attraverso un contenimento confortevole e sicuro. La composizione, prevalentemente in poliesteri ipoallergenico e traspirante, previene l'eccessiva pressione sui polsi (e conseguenti abrasioni). La chiusura è realizzata in velcro, le fasce vengono allacciate al telaio del letto attraverso l'apposita cinghia.



Codice articolo	Descrizione
ALLM FERMBRAC M	Coppia di fasce ferma braccio con chiusura in velcro misura M
ALLM FERMBRAC L	Coppia di fasce ferma braccio con chiusura in velcro misura L



POSIZIONAMENTI

Posizionamento a letto e protezioni

Cuscini

Prevenzione antidecubito

Il corretto posizionamento con un'adeguata distribuzione dei carichi è fondamentale per prevenire l'insorgere di piaghe da decubito o altri effetti indesiderati conseguenti al mantenimento protratto nel tempo di posizioni statiche, sia a letto che seduti. Alcuni ausili o l'utilizzo combinato di diversi di essi permettono di ovviare a questi problemi.



Cuscino a "S"



↗ 170 cm
⊘ 35 cm

Previene le pressioni eccessive principalmente sui trocanteri. Utile per le posizioni sul fianco a 30°. La grande superficie di contatto allevia il carico su diversi segmenti corporei. Cover traspirante ed impermeabile. Interno in microsfere di polistirolo per un adeguato mix di stabilità e confort.

Codice articolo	Descrizione
ALLPA CUSCS	Cuscino a "S" in microsfere di polistirolo

Cuscino "a mezzaluna"



↗ 100 cm
⊘ 20 cm

Utilizzato principalmente per alleviare i carichi nelle zone del trocantere, dei gomiti, dei talloni e malleoli e nella zona sacrale e ischiatica. Cover traspirante ed impermeabile. Interno in microsfere di polistirolo per un adeguato mix di stabilità e confort.

Codice articolo	Descrizione
ALLPA MEZLUN	Cuscino "a mezzaluna" in microsfere di polistirolo

Cuscino semicircolare



↗ 50 cm
⊘ 14 cm

Indicato per la parte superiore del corpo ovvero per la zona intorno al capo e alla testa. Cover traspirante ed impermeabile. Interno in materiale viscoelastico per un'adeguata prevenzione.

Codice articolo	Descrizione
ALLPA CUSEMICIR	Cuscino semicircolare in materiale viscoelastico

Cuscino "a tubo"



↗ 70 cm
⊘ 15 cm

Allevia i carichi nelle zone del trocantere, dei gomiti, dei talloni e malleoli e nella zona sacrale e ischiatica. Cover traspirante ed impermeabile. Interno in materiale viscoelastico per un'adeguata prevenzione.

Codice articolo	Descrizione
ALLPA CUSTUB	Cuscino "a tubo" in materiale viscoelastico

Cuscino rettangolare universale

Utilizzato principalmente per alleviare i carichi nelle zone del trocantere, dei gomiti, dei talloni, malleoli e nella zona sacrale e ischiatica. Cover traspirante ed impermeabile. Interno in materiale viscoelastico per un'adeguata prevenzione.

Codice articolo	Descrizione
ALLPA CUSRET	Cuscino rettangolare in materiale viscoelastico



↗ 53 cm
↔ 35 cm

Proteggi tallone



↗ 29 cm
↔ 12-19 cm
↑↓ 21 cm
⊘ max 40°

In tessuto misto poliestere e cotone, per confort, traspirabilità e durata. Fissaggio attraverso fasce regolabili in velcro. Interno in materiale viscoelastico per un'adeguata prevenzione.

Codice articolo	Descrizione
ALLPA PROTALL	Proteggi tallone - taglia unica

Cuscino anatomico antidecubito per tallone e caviglia

↔ 23 cm
↗ 50 cm
↔ interna 11 cm
↗ interna 45 cm
↕ interna 2 cm
⊘ foro 10 cm

85 kg/m³
1,14 kg
max 40°



La forma anatomica del cuscino consente un ottimo posizionamento della gamba di utenti allettati attraverso lo scarico del tallone e della caviglia grazie alla presenza del foro centrale. La composizione in schiuma visco-elastica in memory-foam aumenta il confort, protegge la pelle riducendo il rischio di ulcere da pressione. Ha due fasce con chiusura in velcro. È completamente sfoderabile per il lavaggio.

Codice articolo	Descrizione
ALLPA ANTDECTAL	Cuscino anatomico antidecubito per tallone e caviglia



POSIZIONAMENTI

Posizionamento a letto e protezioni

Cuscini

Imbottitura protettiva-di posizionamento per sponda letto

Misura 1

- ↗ 140 cm
- ↑↓ (altezza) 34 cm
- ↑↓ (spessore) 3 cm
- 🔄 max 90°

Misura 2

- ↗ 190 cm
- ↑↓ (altezza) 34 cm
- ↑↓ (spessore) 3 cm
- 🔄 max 90°



Materassino per la protezione dell'utente dalle lesioni contro la sponda del letto.

L'imbottitura è morbida ed impedisce all'utente di posizionare le braccia tra le barre della sponda. Per un rapido fissaggio e smontaggio è dotata di quattro cinghie con fibbia regolabile.

Disponibile in due misure dalla diversa lunghezza.

Codice articolo	Descrizione
ALLM IMBSPOND140	Imbottitura protettiva-di posizionamento per sponda letto 140x34 cm
ALLM IMBSPOND190	Imbottitura protettiva-di posizionamento per sponda letto 190x34 cm

Applicazioni integrate per la prevenzione delle piaghe da decubito

PREVENZIONE ALLE GINOCCHIA E ALLE ANCHE

Le gambe in abduzione riducono i carichi sulle ginocchia e le anche. Con questi tre cuscini si ottiene l'effetto desiderato.



PREVENZIONE AL SACRO, ISCHI E TALLONI, GOMITI E SPALLE

Alcune posizioni di seduta o da letto portano uno scivolamento verso il basso aumentando le forze di taglio e l'insorgere di piaghe. Questa combinazione evita tale effetto.



SUPPORTO ALLE GINOCCHIA E ALLA ZONA CERVICALE

Scarico della zona cervicale, supporto delle ginocchia con conseguente scarico dei talloni.



SCARICO DEL TALLONE




PIEDE EQUINO



POSIZIONAMENTO SUL FIANCO

Nella posizione sul fianco i cuscini supportano le gambe e le anche dell'utente, distribuendo i carichi.

A 135°

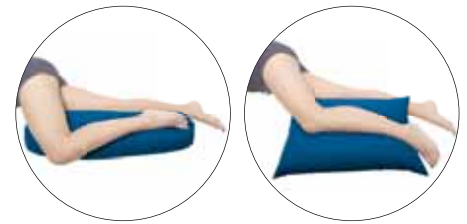

A 30°

