



### Domande frequenti

- **Fai da Solo - L'originale può essere fissato al pavimento?**

Se uno o entrambi i braccioli sono già montati alla seduta elevatrice per WC e avete la sensazione di instabilità oppure tendete ad appoggiarvi su un lato rispetto ad un altro, consigliamo di fissare **Fai da Solo - L'originale** al pavimento. Le basi di appoggio, essendo forate, possono essere fissate al pavimento con delle viti o, in alternativa, adesivi a base di silcone

- **Come faccio ad abbassare la seduta al punto più basso?**

Si consiglia di non abbassare completamente la seduta elevatrice in quanto può essere scomodo / doloroso distendere la parte lombare della schiena. La seduta può essere bloccata in qualsiasi posizione per l'uso. Tuttavia, è essenziale che la seduta sia sollevata **alla massima altezza** e **abbassata completamente** dopo l'uso per garantire ai motori su entrambi i lati di **Fai da Solo - L'originale** di percorrere la piena portata dei loro archi di sollevamento in modo da rimanere sincronizzati. Se i motori non sono più sincronizzati, si possono causare danni meccanici e/o fisici alla seduta del prodotto.

- **È possibile utilizzare Fai da Solo - L'originale in una stanza umida?**

The Mountway **Fai da Solo - L'originale** è classificato IP44; è dotata di protezione contro gli effetti degli spruzzi d'acqua conforme alla norma internazionale. Non può essere immerso in acqua o utilizzato sotto la doccia. Se utilizzato in ambiente umido deve essere posto lontano dalla doccia poiché resistente agli schizzi d'acqua ma non resistente a schizzi ininterrotti.

- **Fai da Solo - L'originale ha bisogno di una regolare manutenzione?**

È consigliato un controllo annuale di **Fai da Solo - L'originale** da parte di un rivenditore autorizzato il quale verificherà che non vi siano raccordi allentati o altri segni danni meccanici. Controllare l'area della base o il pavimento per accertarsi che siano pienamente sicuri per l'uso della seduta elevatrice in totale sicurezza.

## ● Quanti passaggi posso effettuare con batteria completamente carica?

Questo dipende da molte variabili tra cui l'età della batteria, il peso dell'utente, lo stato di carica della batteria e il numero di volte in cui la batteria è stata caricata durante la sua vita.

Test effettuati su un prodotto nuovo con batteria completamente carica con un peso di 130 kg, ha fornito circa 80 passaggi (su e giù) prima che si accendesse la luce rossa ad indicare la necessità di mettere sotto carica la batteria.

Tuttavia questo dato è puramente indicativo e rimandiamo alle variabili descritte nel primo paragrafo di questa sezione. È garantito un ciclo completo quando viene utilizzata da una persona del peso di 160 kg. Un ciclo è costituito da:

- Salita nella posizione più alta (senza peso dell'utente);
- Discesa dell'utente alla posizione più bassa;
- Salita portando l'utente nella posizione più alta per stare in piedi;
- Discesa finale nella posizione più bassa (senza peso dell'utente).

## ● Quanto tempo ci vuole per ricaricare la batteria?

Per ricaricare una batteria scarica ci vogliono, approssimativamente, 5 ore. Inizialmente, la spia luminosa della scatola del caricatore lampeggia in una rapida sequenza di rosso, verde, rosso, verde, prima di emettere una luce rossa fissa, la quale indica che la ricarica è in corso.

Quando il pacco batterie è completamente carico, la luce rossa sulla scatola del caricatore diventa verde fissa, ad indicare che il pacco batterie è pronto per essere utilizzato.

Può rimanere in questo stato (detta carica di mantenimento) in quanto non c'è alcun rischio di sovraccarico della batteria. Fai da Solo - **L'originale** viene fornito con 2 batterie; mentre una è in uso l'altra può essere messa in carica.

## ● Come si pulisce **Fai da Solo - L'originale**?

Per effettuare al meglio la pulizia del WC e della seduta elevatrice è bene alzare alla massima altezza il copri WC; in alternativa rimuovere la seduta elevatrice dal WC.

Il prodotto deve essere pulito con un tipo di detergente per bagno delicati e non abrasivo. Se la seduta elevatrice viene utilizzata da più persone si consiglia di disinfettarla dopo ogni utilizzo. Detergenti a base di solventi (acqua regia) sono sconsigliati all'utilizzo in quanto potrebbero danneggiare la seduta e le superfici della copertura.

Per disinfettare la seduta si consiglia l'uso di un panno o spazzola morbida e pulire con una soluzione sterilizzate o un detergente antibatterico. Utilizzare la stessa concentrazione impiegata per pulire altre superfici domestiche. Strofinare quindi asciugare con un panno

pulito e asciutto.


La seduta elevatrice NON E' IMPERMEABILE e NON PUO' essere lavato in LAVATRICI automatiche MA SOLO A MANO.

- **Fai da Solo - L'originale può interferire con il mio pacemaker?**

**Fai da Solo - L'originale** è conforme con EN55011-1: 1998 + A1: 1999 + A2: 2002 e EN60601-1-2: 2001 Gruppo 1 Classe B in materia di compatibilità elettromagnetica e non può quindi interferire con lo stimolatore cardiaco.

- **Fai da Solo - L'originale può essere utilizzato su un WC monoblocco?**

Dipende dallo spazio disponibile tra il WC e la vaschetta dello scarico. Bisogna avere almeno 10 cm di distanza tra il bordo posteriore del WC e la vaschetta dello scarico. È raccomandata una dimostrazione / valutazione con il rivenditore prima dell'acquisto del prodotto per stabilire la compatibilità con il vostro bagno.

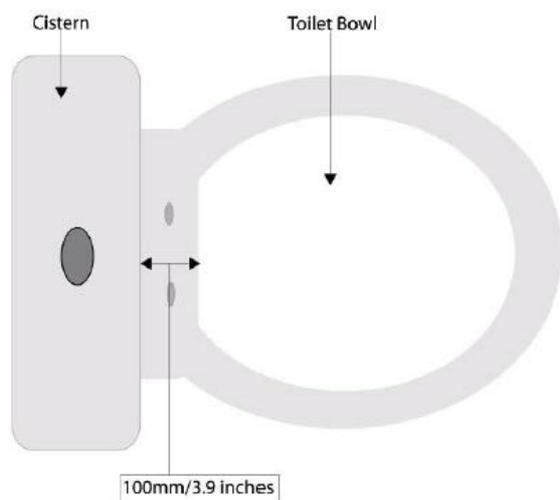

- **È possibile utilizzare Fai da Solo - L'originale su sistemi di risciacquo automatico, per esempio, Geberit o Closomat?**

**Fai da Solo - L'originale** non è compatibile con la gamma Geberit AquaClean, Closomat Palma Vita o qualsiasi tipo di sedile con risciacquo WC. **Fai da Solo - L'originale** è compatibile con Closomat Samoa (modello precedente alla gamma Palma Vita). Tuttavia sono necessarie alcune modifiche sul prodotto da parte di un tecnico Closomat.

- **Fai da Solo - L'originale è adatto per chi soffre di distrofia muscolare?**

Come regola generale nel caso si soffra di distrofia muscolare, bisogna essere in grado di bloccare le ginocchia e le anche prima di sedersi sulla seduta. **Fai da Solo - L'originale** si alza e si inclina in avanti; questo movimento potrebbe generalmente impedire di bloccare le ginocchia e le anche in modo da stare in piedi rendendo **Fai da Solo - L'originale** inadatto. Alcune persone hanno utilizzato il prodotto senza alcun problema. Si consiglia comunque di chiedere una dimostrazione prima di acquistare il prodotto.

- **Perché non appare alcuna luce sul caricabatterie o sul bracciolo quando la batteria è collegata?**

È probabile che si sia bruciato il fusibile della batteria. Si è verificato poiché, probabilmente, è stato collegato il caricabatterie mentre il prodotto era ancora acceso. Il prodotto deve essere sempre spento prima di attaccare il caricabatterie alla batteria.